




# Báscula DiaMan



www.diaman.net

## Cómo Insertar las Baterías:

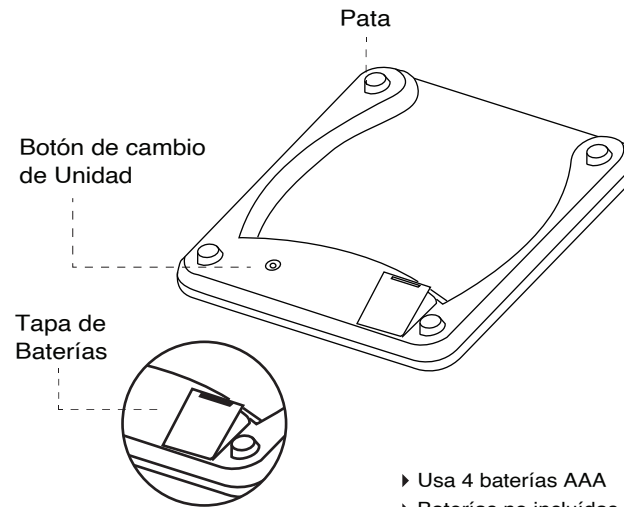

- ▶ Usa 4 baterías AAA
- ▶ Baterías no incluidas

## Cómo emparejar la báscula DiaMan a la App DiaManBGM:

- ▶ Descargue la App DiaManBGM disponible en PlayStore y App Store.
- ▶ Antes de emparejar la báscula DiaMan, asegúrese de haber insertado las baterías correctamente.
- ▶ En la App DiaManBGM seleccione el icono de Bluetooth en la esquina superior derecha
- ▶ Al seleccionar el ícono de Bluetooth aparecerán los dispositivos DiaMan que puede emparejar.
- ▶ Una vez que vea la báscula DiaMan en su App, seleccione la báscula.
- ▶ Ponga peso sobre la báscula para que encienda.
- ▶ Corrobore sus datos en la App como sexo, fecha de nacimiento y altura para que los resultados y mediciones sean precisos.
- ▶ Listo! su báscula DiaMan está emparejada y lista para transmitir su información.

Conexión con la App DiaManBGM



## Cómo Pesarse en la báscula DiaMan:



- ▶ Abra la App DiaManBGM
- ▶ Asegurese de pararse en la báscula con los pies descalzos y secos. Ponga un pie en la báscula y remuevalo, cuando encienda la pantalla, la báscula se conectará automáticamente con la App y el icono de Bluetooth aparecerá en la pantalla
- ▶ La báscula no puede medir el porcentaje de grasa corporal si utiliza zapatos o calcetines.
- ▶ Párese derecho(a) en la báscula para comenzar a medir, cuando las lecturas en la pantalla dejen de variar, parpadeará tres veces la pantalla y luego el resultado quedará fijo en la pantalla.

Nota: Favor de mantener la báscula DiaMan en una superficie plana y dura para resultados precisos.

## Mensajes en la báscula DiaMan y sus símbolos

- 0000 Midiendo grasa corporal
- EE No se pudo identificar (Asegurese de que sus pies estén secos y limpios)
- LB Batería Baja (Insertar baterías nuevas)
- OL Sobrepeso
- EE21 Medición Anormal (Baje de la báscula e intente de nuevo)
- 8888 Inicializando
- 88 La báscula no está conectada a la App

Importado y distribuido por:  
DiaMan Medical SA de CV  
Azteca Norte 4426, 2A  
Santiago Momoxpan  
San Pedro Cholula, Puebla  
C.P 72760  
www.diaman.net

## Cuidados y Mantenimiento

### Cuidados y Mantenimiento

Limpie la superficie de la báscula DiaMan con un trapo húmedo.  
No utilice detergente o solventes para limpiar la báscula DiaMan.

La báscula DiaMan no se recomienda para:

- ▶ Menores de edad
- ▶ Mujeres embarazadas
- ▶ Pacientes con marcapasos o cualquier otro aparato médico interno.

### Soporte y dudas:

Para dudas con el uso de la báscula, preguntas sobre garantía y soporte técnico de la App, dirigirse a [www.diaman.net](http://www.diaman.net) o hablar al +52 2225837878, L-V 09:00 a 17:00 hrs.

Hecho en China