




# Báscula DiaMan



www.diaman.net

## Cómo Insertar las Baterías:

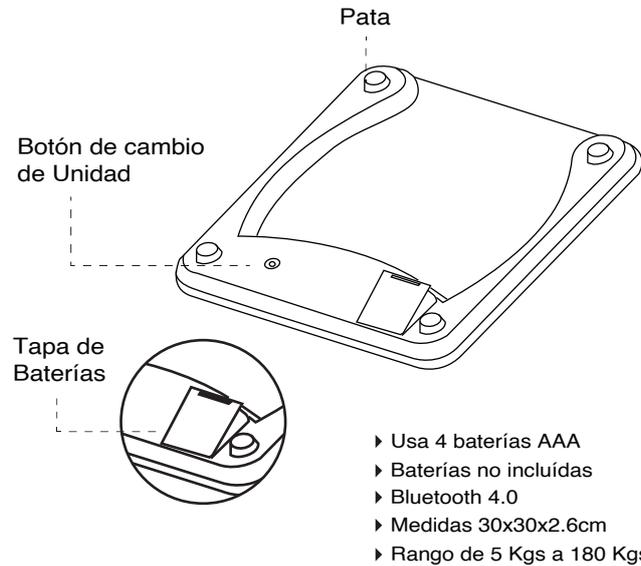

- ▶ Usa 4 baterías AAA
- ▶ Baterías no incluidas
- ▶ Bluetooth 4.0
- ▶ Medidas 30x30x2.6cm
- ▶ Rango de 5 Kgs a 180 Kgs

## Cómo emparejar la báscula DiaMan a la App DiaManBGM:

- ▶ Descargue la App DiaManBGM disponible en PlayStore y App Store.
- ▶ Antes de emparejar la báscula DiaMan, asegúrese de haber insertado las baterías correctamente.
- ▶ En la App DiaManBGM seleccione el bloque de peso o el símbolo de agregar en la parte inferior.
- ▶ Seleccione Nuevo Registro para registrar una nueva medición de peso.
- ▶ Seleccione el icono de Usar Bluetooth, después seleccione Enlazar Báscula
- ▶ Ponga peso sobre la báscula para que encienda.
- ▶ Siga las instrucciones en la pantalla.
- ▶ Subirse a la báscula, esperar a que parpadee el peso varias veces y transmita la información a la App.
- ▶ Listo! su báscula DiaMan está emparejada y ha transmitido la última lectura.

Conexión con la App DiaManBGM




## Cómo Pesarse en la báscula DiaMan:



- ▶ Abra la App DiaManBGM
- ▶ Asegúrese de pararse en la báscula con los pies descalzos y secos. Ponga un pie en la báscula y remuevalo, cuando encienda la pantalla, la báscula se conectará automáticamente con la App y el icono de Bluetooth aparecerá en la pantalla
- ▶ La báscula no puede medir el porcentaje de grasa corporal si utiliza zapatos o calcetines.
- ▶ Párese derecho(a) en la báscula para comenzar a medir, cuando las lecturas en la pantalla dejen de variar, parpadeará tres veces la pantalla y luego el resultado quedará fijo en la pantalla.

Nota: Favor de mantener la báscula DiaMan en una superficie plana y dura para resultados precisos.

## Mensajes en la báscula DiaMan y sus símbolos

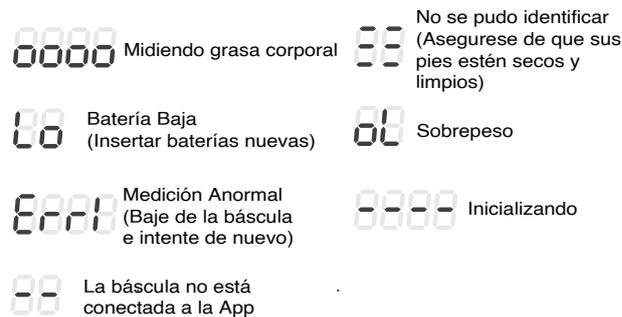

Nota: Puede utilizar la báscula y llevar más datos por medio de la App Belter disponible en Android.



Hecho en China

Importado y distribuido por: DiaMan Medical SA de CV Azteca Norte 4426, 2A Santiago Momoxpan San Pedro Cholula, Puebla C.P 72760 www.diaman.net

## Cuidados y Mantenimiento

### Cuidados y Mantenimiento

Limpie la superficie de la báscula DiaMan con un trapo húmedo. No utilice detergente o solventes para limpiar la báscula DiaMan.

La báscula DiaMan no se recomienda para:

- ▶ Menores de edad
- ▶ Mujeres embarazadas
- ▶ Pacientes con marcapasos o cualquier otro aparato médico interno.

### Soporte y dudas:

Resolución de preguntas frecuentes, manuales y videos ilustrativos: <https://www.diaman.net/faq/> Para hacer efectiva la garantía, envíe un correo a: [contacto@diaman.net](mailto:contacto@diaman.net) o visite nuestra página de internet [www.diaman.net](http://www.diaman.net) para encontrar opciones de contacto con nosotros.

